

Quality time for better care

HOSPITAL CARE

Catálogo de Línea de Infusión.





Terumo brinda soluciones que ayudan a mejorar la calidad y la seguridad de la atención médica. Contribuimos a mejorar la seguridad del tratamiento, la eficiencia del flujo de trabajo y una mejor calidad de vida para los pacientes.

Propuesta de valor Terumo

Brindar al cliente la mayor flexibilidad y velocidad posible, para hacer negocios sostenibles de largo plazo.

Servicio que mejore los procesos, costos y resultados de los hospitales, ayudando a incrementar el acceso a la salud.

Flexibilidad para ir al mercado

Fortaleza en consultoría

Proporcionar educación médica personalizada a los profesionales de la salud, para mejorar el resultado y proteger la seguridad del paciente.

Ser el mayor estándar de servicio en el mercado.

Servicio superior

Educación personalizada

Cliente como centro

SISTEMA INTELIGENTE DE INFUSIÓN

El sistema de Infusión Terufusion® ofrece bombas de infusión y bombas de jeringa, confiables e innovadoras.

Combinamos una sofisticada tecnología con aplicaciones fáciles de usar, que simplifiquen el trabajo, ayudando a obtener mejores resultados para los pacientes, sin comprometer la seguridad y calidad del tratamiento.

Bombas inteligentes con conectividad

1. Bomba de Infusión



MID PRESS® TE-LM835


2. Bomba de Jeringa



MID PRESS® TE-SS835

MID PRESS® Sistema Midpress: Para infusiones y transfusiones precisas

Metodo de dedos peristalticos - sistema lineal

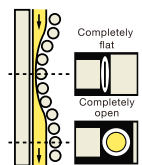

El sistema Midpress® utiliza un dedo para realizar una presión parcial sobre la línea, de esta forma no comprime completamente el tubo y permite mantener una precisión constante del flujo.

Beneficios:

- Permite realizar transfusiones de sangre utilizando un set de transfusión.
- Reduce el nivel de hemolisis durante transfusiones sanguíneas.

Sistema de comunicación

- Estaciones de infusión inteligentes que ahorran espacio.
- Los racks pueden manejar hasta 3 bombas a la vez y se pueden usar hasta 3 racks apilados (para 9 bombas en total).
- Las bombas se pueden conectar y desconectar fácilmente mientras permanece unido a la abrazadera del poste.

Estación de infusión inteligente (racks)



TE-RS800
Con función de comunicación

Estación de infusión inteligente estandar



TE-RS700
Sin función de comunicación

SISTEMA INTELIGENTE DE INFUSIÓN

Contamos con dos líneas de infusión destinadas a la administración de soluciones vía intravenosa para diferentes áreas terapéuticas.

Portafolio de sets




Línea de infusión ESTÁNDAR libre de DEHP.




Línea de infusión para ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS con bureta graduada.



Línea de infusión ESTÁNDAR libre de PVC.

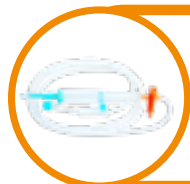

Línea de TRANSFUSIÓN para sangre y hemoderivados.

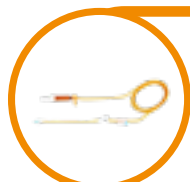

Línea de infusión FOTOSENSIBLE

Portafolio de sets libre de aguja



Línea de infusión libre de aguja ESTÁNDAR



Línea de infusión libre de aguja ESTÁNDAR con válvula antireflujo



Línea de infusión libre de aguja VOLÚMENES MEDIDOS



Línea de infusión libre de aguja ONCOLÓGICO

Terufusion® Set de Infusión estándar TI*PU300WY31

DESCRIPCIÓN

- Plástico grado médico, estéril y desechable.
- Libre de *DEHP y látex.
- Bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo con macrogotero, factor de goteo 20 gotas/1ml.
- Tubo transportador con dispositivo en "Y" para inyección y obturador de tubo transportador.
- Adaptador de aguja, protectores de aguja.
- Longitud: 240 cm.
- Filtro 15 micras.

PRESENTACIÓN

Caja con 20 piezas.
Empaque colectivo con 200 piezas.



LIBRE DE DEHP

LIBRE DE LÁTEX



LÍNEAS DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN TERUFUSION® SMART

Terufusion®

Terufusion® Set de Infusión volúmenes medidos TS-PM370LY

DESCRIPCIÓN

- Plástico grado médico, estéril y desechable.
- Libre de *DEHP y látex.
- Bayoneta, filtro de aire, cámara bureta con capacidad de 100 ml con escala graduada en 1 ml.
- Cámara de goteo flexible con microgotero con factor de goteo 60 gotas/1 ml.
- Adaptador de aguja, protectores de aguja.
- Tubo transportador, obturador de tubo transportador.
- Longitud: 300 cm
- Filtro 40 micras.



PRESENTACIÓN

Caja con 10 piezas.
Empaque colectivo con 100 piezas.

LIBRE DE DEHP

LIBRE DE LÁTEX

60
GOTAS / 1ml
POR BOMBA




Terufusion® Set Estándar Libre de PVC TI-PJ300LY

DESCRIPCIÓN

- Plástico grado médico, estéril y desechable.
- Libre de PVC.
- Bayoneta, cámara de goteo, flexible con macrogotero con factor de goteo 20 gotas/1ml.
- Tubo transportador, mecanismo regulador de flujo con obturador de tubo transportador.
- Adaptador de aguja, protectores de aguja.
- Longitud: 220 cm.
- Filtro 40 micras.

PRESENTACIÓN

Caja con 20 piezas.
Empaque colectivo con 200 piezas.

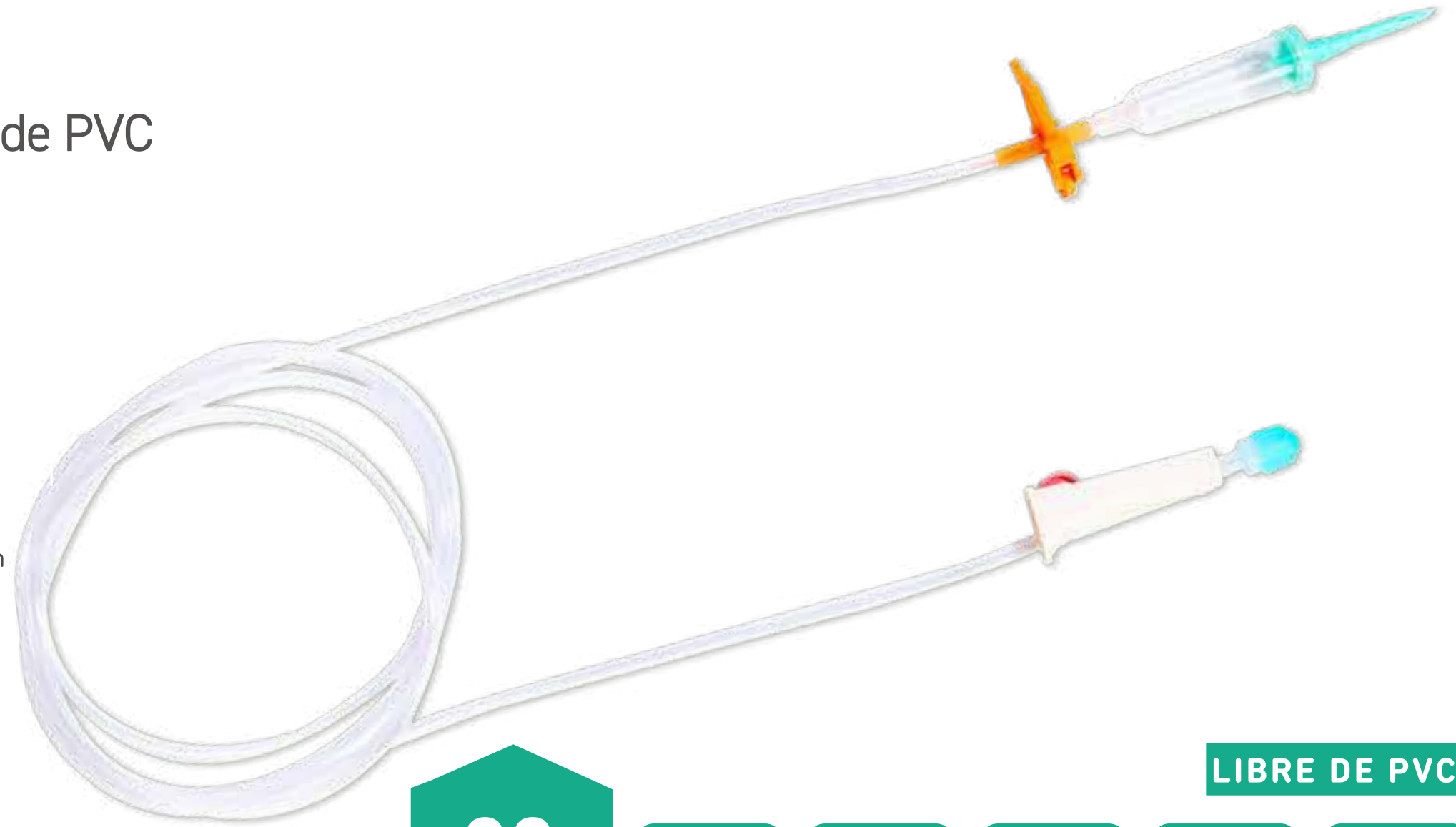


LIBRE DE PVC

Terufusion® Set de Infusión Transfusión sanguínea y hemoderivados TB-PU300LY

DESCRIPCIÓN

- Para sangre y sus componentes.
- Plástico grado médico, estéril y desechable.
- Libre de *DEHP
- Bayoneta, cámara de goteo flexible, filtro anti hemolítico.
- Tubo transportador, mecanismo regulador de flujo con obturador de tubo transportador con macro gotero, factor de goteo: 20 gotas/1ml.
- Adaptador de aguja, protectores de bayoneta.
- Longitud: 220 cm.

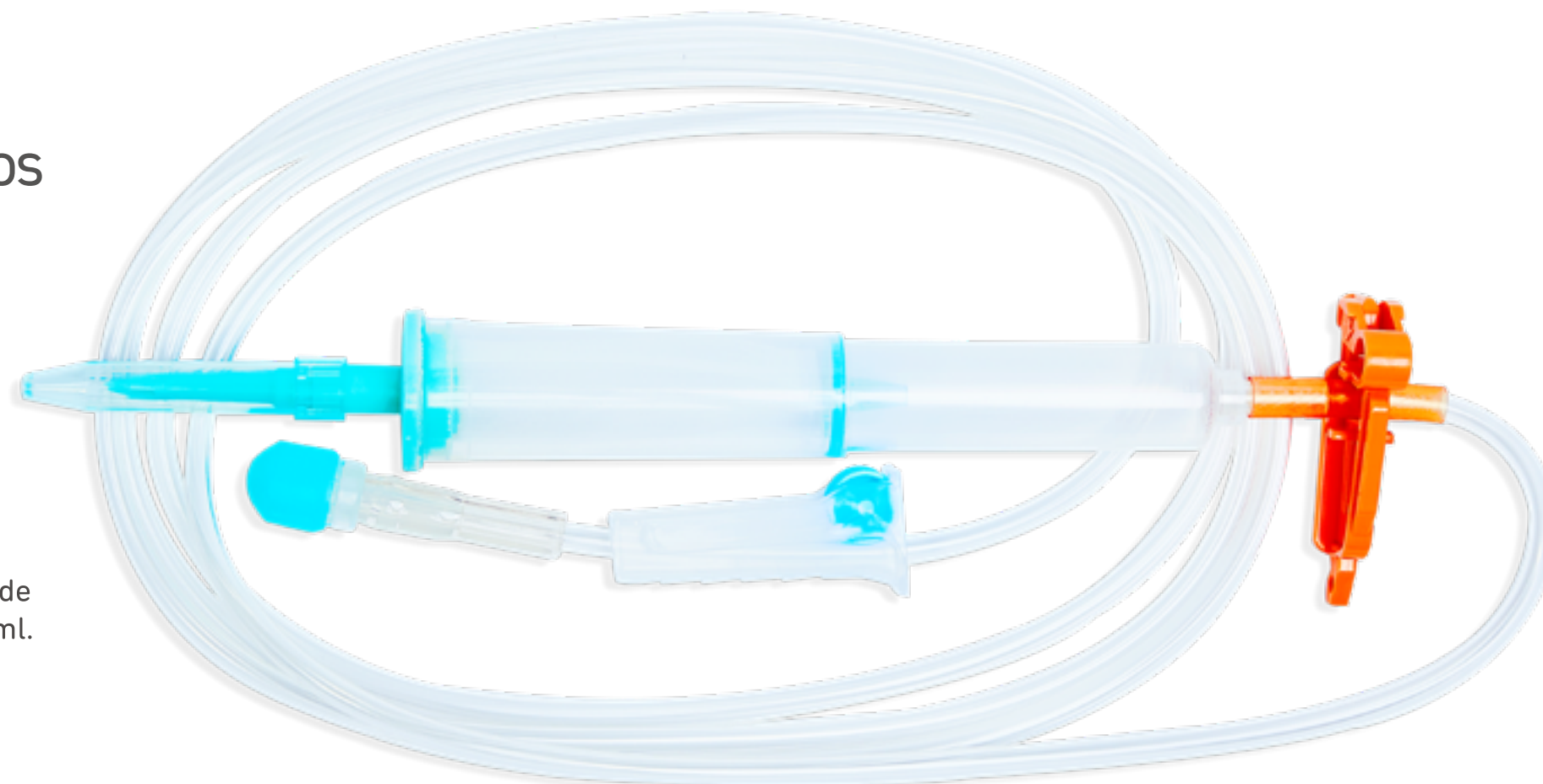

PRESENTACIÓN

Caja con 30 piezas.
Empaque colectivo con 180 piezas.




LIBRE DE DEHP

Terufusion® Set de Infusión Fotosensible TI*PA300WY01

DESCRIPCIÓN

- Plástico grado médico, estéril y desechable.
- Bayoneta.
- Tubo transportador, antiactínico de baja absorción para medicamentos fotosensibles, obturador de tubo transportador con macrogotero, factor de goteo: 20 gotas/ml.
- Adaptador de aguja, protectores de bayoneta.
- Longitud: 220 cm.
- Volumen de purga 20 ml.

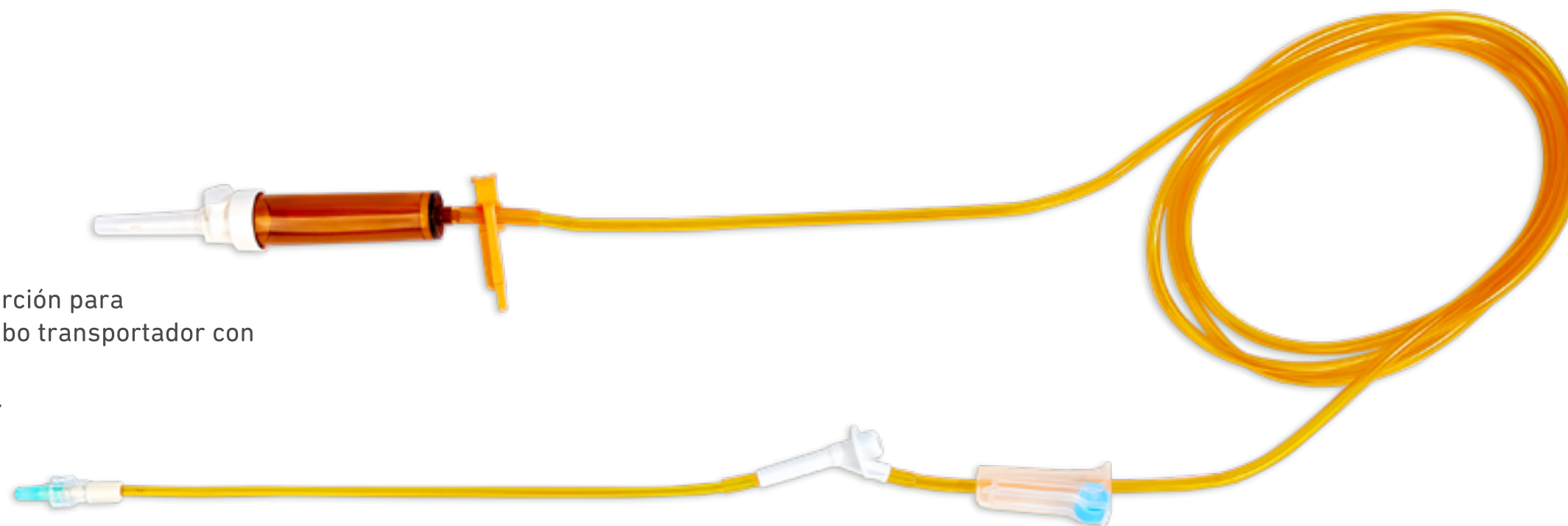

PRESENTACIÓN

Caja con 20 piezas.
Empaque colectivo con 200 piezas.




LÍNEAS DE INFUSIÓN LIBRE DE AGUJA PARA BOMBA
DE INFUSIÓN SMART

SURPLUG™ AD

SURPLUG™ AD Estándar SA*PV400SY01E

DESCRIPCIÓN

- Plástico grado médico, estéril y desechable.
- Libre de *DEHP y látex.
- Bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo con macrogotero, factor de goteo 20 gotas/1ml.
- Tubo transportador con dispositivo en "T" para inyección y obturador de tubo transportador.
- Adaptador de aguja, protectores de aguja.
- Longitud: 260 cm.
- Filtro 15 micras.

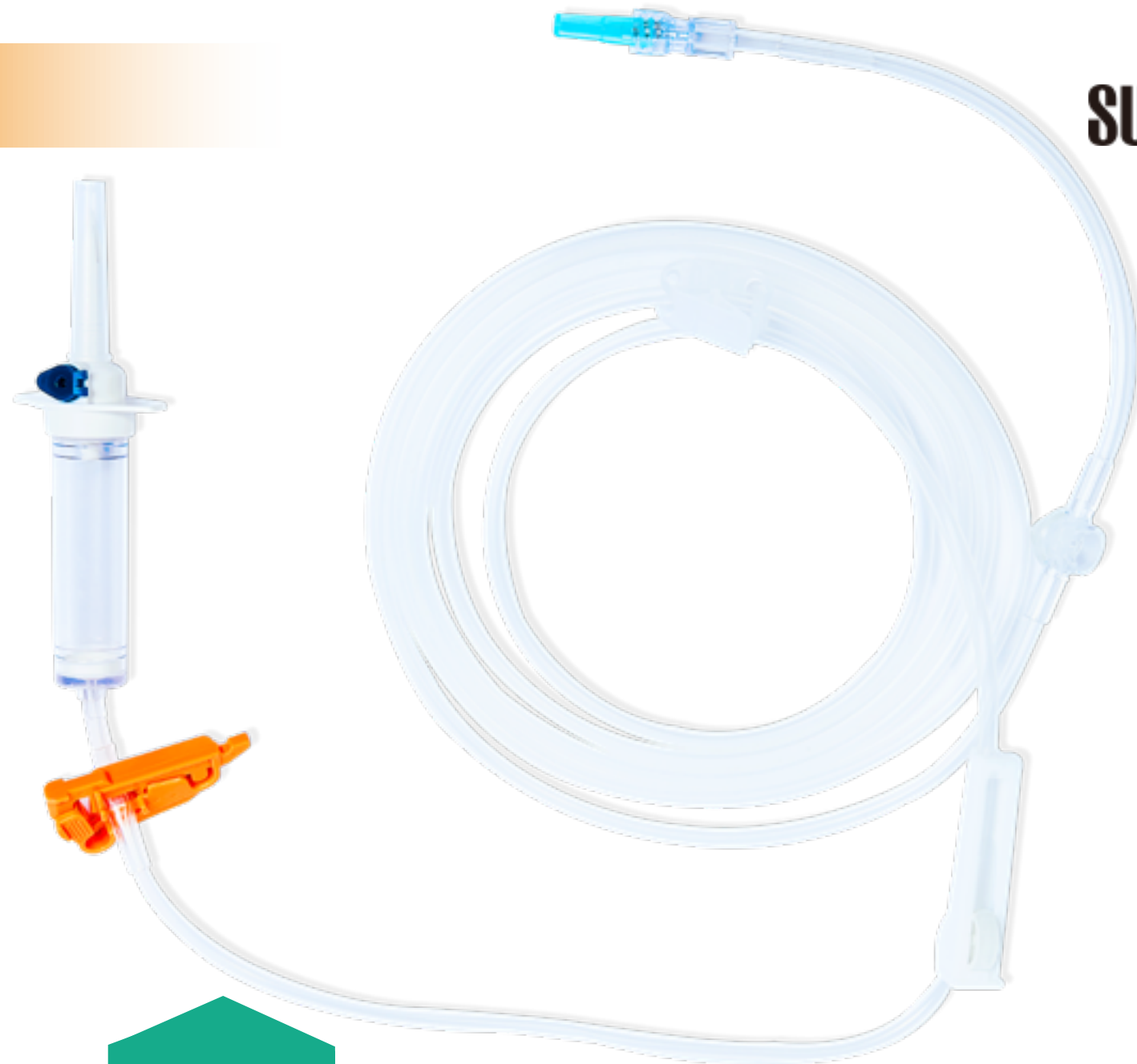

LIBRE DE DEHP

LIBRE DE LÁTEX

PRESENTACIÓN

Caja con 20 piezas.
Empaque colectivo con 200 piezas.

20
GOTAS / 1ml
POR BOMBA



SURPLUG™ AD Estándar con válvula antireflujo SA*PV40BAY01

DESCRIPCIÓN

- Plástico grado médico, estéril y desechable.
- Libre de *DEHP y látex.
- Bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo con macrogotero, factor de goteo 20 gotas/1ml.
- Tubo transportador con dispositivo en "T" para inyección y obturador de tubo transportador.
- Fácil purgado.
- Válvula antireflujo.
- Adaptador de aguja, protectores de aguja.
- Longitud: 220 cm.
- Filtro 15 micras.

PRESENTACIÓN

Caja con 20 piezas.
Empaque colectivo con 200 piezas.

20
GOTAS / 1ml
POR BOMBA



LIBRE DE DEHP


LIBRE DE LÁTEX



SURPLUG™ AD Volúmenes Medidos SA*PY470WY01E

DESCRIPCIÓN

- Plástico grado médico, estéril y desechable.
- Libre de *DEHP y látex.
- Bayoneta, filtro de aire, cámara bureta con capacidad de 150 ml con escala graduada en 1 ml.
- Cámara de goteo flexible con microgotero con factor de goteo 60 gotas/1ml
- Tubo transportador con dispositivo en "T" para inyección y obturador de tubo transportador.
- Adaptador de aguja, protectores de aguja.
- Longitud: 285cm.
- Filtro 40 micras.

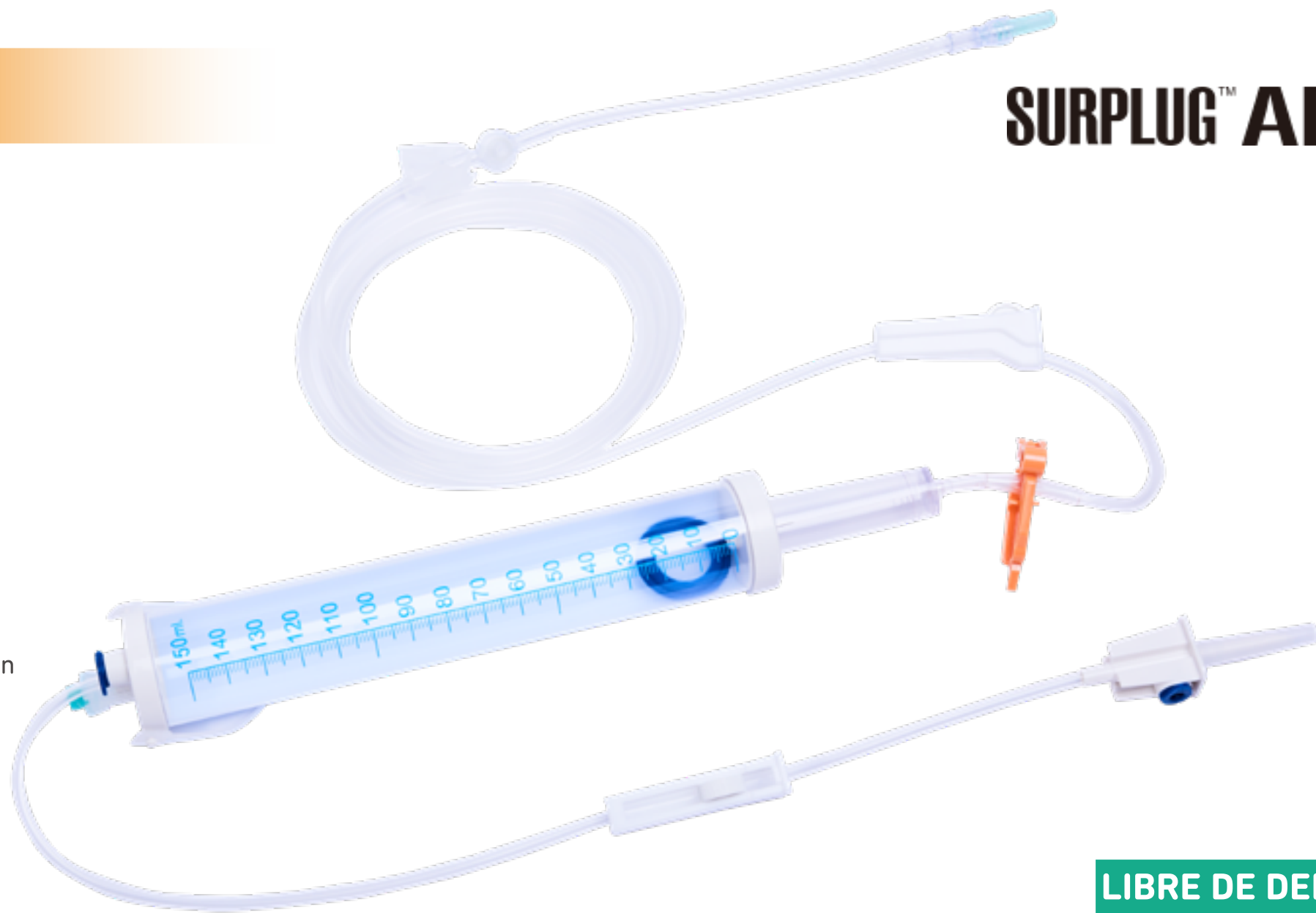


LIBRE DE DEHP

LIBRE DE LÁTEX

PRESENTACIÓN

Caja con 15 piezas.
Empaque colectivo con 60 piezas.

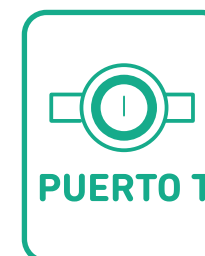

LÍNEAS DE INFUSIÓN LIBRE DE AGUJA PARA BOMBA
DE INFUSIÓN SMART

SURPLUG™ AD

SURPLUG™ AD Set Oncológico SA*PH400WY01E

DESCRIPCIÓN

- Plástico grado médico, estéril y desechable.
- Libre de *DEHP y látex.
- Bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo con macrogotero, factor de goteo 20 gotas/1ml.
- Tubo transportador con dispositivo en "T" para inyección y obturador de tubo transportador.
- Adaptador de aguja, protectores de aguja.
- Longitud: 260 cm.
- Filtro 0.2 micras.

PRESENTACIÓN

Caja con 20 piezas.
Empaque colectivo con 200 piezas.

20
GOTAS / 1ml
POR BOMBA



LIBRE DE DEHP
LIBRE DE LÁTEX



TERUMO
MEDICAL CARE
SOLUTIONS



TERUMO MEDICAL DE MÉXICO

Av. Insurgentes Sur #1647, Piso 11. Col. S. J. Insurgentes, 03900, CDMX, México.

Tel: +52 55 1085 0770 www.terumomexico.com

E-mail: contactotmm@terumomedical.com

[in](#) /terumo-mexico [f](#) /TerumoMexico [t](#) /TerumoMexico

Aviso de Publicidad No.

Material exclusivo para los profesionales de la salud, queda prohibida su distribución fuera de la institución médica en la que fueron entregados por Terumo Medical de México.